Traduction provisoire (Français), pas encore relue par un locuteur courant.

Pour les prestataires de soins · Direct Link

Instructions d'Utilisation

Les présentes instructions d'utilisation s'adressent aux prestataires de soins qui ont l'intention de prescrire un test de dépistage AudibleHealth AI en envoyant un message contenant un lien. Si vous êtes un patient, veuillez consulter l'un de nos Guides de Démarrage Rapide destinés aux patients.

Version **6**	S'applique à **App v2.5.0**
En vigueur **TBD**	UDI-DI (GS1) **00199284438224**
GMDN **64033**	Langue **Français**

S'applique à l'application AudibleHealth AI v2.5.0 et à ses versions de maintenance ultérieures (v2.5.x).

Consulter la dernière version en ligne :
https://help.audiblehealth.ai/fr/ifu/direct-link

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce dispositif.

01

Utilisation prévue

AudibleHealth AI est un logiciel d'aide à la décision clinique (CDSS) destiné à aider les prestataires de soins dans le dépistage de la tuberculose, de la COVID et/ou de la pneumonie par l'évaluation d'une vocalisation de toux forcée. Le test est destiné à être utilisé sur le lieu de soins par un prestataire de soins pour dépister des adultes âgés de 18 ans ou plus. AudibleHealth AI ne fournit pas de diagnostic définitif et n'est pas destiné à être un outil de diagnostic autonome. En tant que CDSS, il est destiné à être utilisé conjointement avec l'évaluation des risques, la radiographie et d'autres évaluations diagnostiques médicales afin d'aider le clinicien à prendre des décisions de prise en charge individuelle des patients.

02

Contre-indications

L'utilisation du dispositif AudibleHealth AI pour le dépistage est contre-indiquée chez les personnes suivantes :

- Lésion traumatique aiguë récente de la tête, du cou, de la gorge, du thorax, de l'abdomen ou du tronc
- Stomie de trachéotomie perméable
- Traumatisme ou intervention chirurgicale récents du thorax/de l'abdomen/du tronc, lésion neurovasculaire récente/persistante ou intervention chirurgicale intracrânienne récente
- Personnes incapables de tousser volontairement
- Antécédents médicaux de lésion de la lame criblée ou de chirurgie de la lame criblée, de hernie diaphragmatique, de radiothérapie externe du cou / de la gorge / de la région maxillo-faciale, de lésion/paralysie du nerf phrénique, de chirurgie radicale du cou / de la gorge / de la région maxillo-faciale, de traumatisme ou de nodules des cordes vocales

- Les personnes atteintes d'aphasie peuvent avoir des difficultés à produire une FCV dans le délai imparti par l'application et n'ont pas été évaluées en tant que population.

03

Avertissements et précautions

Présentation des informations de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT** — Peut entraîner un préjudice grave ou une décision clinique erronée s'il n'est pas évité.

ⓘ **ATTENTION** — Peut entraîner un préjudice mineur, un échantillon inutilisable ou l'échec du test s'il n'est pas évité.

ⓘ **REMARQUE** — Information complémentaire qui vous aide à administrer le test.

Avertissements

⚠ **AVERTISSEMENT**

AudibleHealth AI fournit uniquement des informations de dépistage, et non des informations de diagnostic, de traitement ou de prise en charge. Les résultats doivent faire l'objet d'une corrélation clinique.

Précautions

ⓘ **ATTENTION**

Les patients présentant des difficultés respiratoires ou un essoufflement peuvent avoir besoin de plus d'une tentative pour réussir l'envoi d'une FCV pour analyse. Si les difficultés respiratoires persistent ou s'aggravent, le patient doit arrêter de tousser et recourir à d'autres moyens de test.

Complications potentielles / événements indésirables

L'envoi d'échantillons de toux pour analyse par un logiciel d'aide à la décision clinique fondé sur l'IA/AA est une procédure à faible risque. Des complications potentielles peuvent survenir

pendant ou après le recueil de la FCV, notamment, mais sans s'y limiter, des étourdissements ou un essoufflement.

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
>
> Bien que le dispositif ait été testé et ait présenté des performances adéquates lors d'études cliniques, il est possible que le dispositif fournisse un résultat de dépistage incorrect.

04

Compatibilité

L'application web AudibleHealth AI est compatible avec les navigateurs web suivants : Google Chrome, Safari, Samsung Internet et Android Chrome, lorsqu'ils sont utilisés sur des smartphones fonctionnant sous les systèmes d'exploitation iOS (version 18 ou ultérieure) et Android (version 13 ou ultérieure).

05

Description du dispositif

AudibleHealth AI est un logiciel d'aide à la décision clinique (CDSS) composé d'un ensemble de sous-programmes logiciels utilisant l'intelligence artificielle/l'apprentissage automatique (IA/AA) pour aider les prestataires de soins (HCP) dans le dépistage de maladies par l'évaluation de vocalisations de toux forcée (FCV).

Les composants d'AudibleHealth AI sont les suivants :

- Module d'application web de test unique
- Module de traitement du son
- Moteurs prédictifs

- Interface avec le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le module d'application web de test unique, qui est l'interface utilisateur vue par l'utilisateur final, permet à l'utilisateur final d'envoyer le fichier audio à l'aide d'un smartphone.

Le module de traitement du son comporte plusieurs composants qui garantissent que chaque FCV est d'une qualité sonore adéquate et préparent la FCV à être évaluée par les modèles d'IA/AA. Les 50 premières ms sont supprimées au début du fichier audio, car elles ne fournissent pas de données utiles au dépistage. Une étape de normalisation est utilisée pour ramener la valeur du signal à une plage uniforme (-14 dBFS) afin de faciliter la correction de l'écrêtage des échantillons. Si le fichier audio est en son stéréo (présenté sur deux canaux), il est converti en mono (un canal). Le filtre passe-haut supprime du fichier les fréquences inférieures à un seuil donné. Une seconde étape de normalisation est ensuite effectuée pour ramener davantage le fichier à une meilleure plage (-6 dBFS). La FCV passe ensuite par le segmenteur wav2vec, qui découpe les fichiers en segments individuels ne contenant chacun qu'une seule toux. Le filtre de durée garantit la qualité des découpages en supprimant les segments contenant plusieurs toux et les segments trop courts pour être correctement évalués. Si au moins dix toux segmentées sont utilisables à l'issue du traitement du son, les échantillons sont rééchantillonnés aux fréquences d'échantillonnage requises par l'algorithme et envoyés aux modèles d'IA/AA. S'il n'y a pas dix toux utilisables, l'utilisateur est invité à envoyer un nouvel échantillon de FCV comme décrit dans les instructions de recueil de la toux.

Le moteur prédictif est constitué d'un ensemble de classificateurs d'IA et d'un oracle déterministe. Les classificateurs sont un groupe de réseaux de neurones convolutifs profonds (CNN) entraînés à détecter des signatures pathologiques spécifiques dans l'échantillon de toux, lequel est converti d'un fichier audio en une image de spectrogramme extrêmement riche en données. Un autre logiciel personnalisé, appelé oracle déterministe, est relié à l'ensemble pour recevoir les prédictions de chaque CNN et fournir un score prédictif final fondé sur les données fournies par les CNN. Les maladies respiratoires créent des signatures ou des motifs pathologiques spécifiques dans les milliers de points de données recueillis dans chaque échantillon de toux. Cela est dû à la manière propre dont chaque maladie affecte l'appareil respiratoire humain. Certaines maladies produisent davantage de mucus, modifient la viscosité du mucus, provoquent une inflammation et des harmoniques de toux variables, ou entraînent des affections telles qu'une constriction des voies respiratoires. En recueillant de nombreuses toux auprès de sujets confirmés positifs pour une maladie spécifique et de nombreuses toux auprès de personnes confirmées négatives, les data scientists d'AudibleHealth AI entraînent des modèles d'IA/AA qui détectent les motifs spécifiques corrélés aux positifs ou aux négatifs pour la maladie cible. Une fois que les classificateurs CNN et

l'oracle associé ont été entraînés et testés sur un nombre suffisant d'échantillons positifs et négatifs, le moteur prédictif est capable d'évaluer une nouvelle toux afin de déterminer si le motif de la toux correspond à la signature connue de la maladie cible. Pour chaque maladie, un ensemble distinct de modèles d'IA/AA, avec son propre oracle associé, est entraîné, testé et déployé. À chaque utilisation de la solution, le prestataire reçoit un score de probabilité numérique compris entre 0 et 100, indiquant la probabilité que l'échantillon corresponde ou non à la maladie connue faisant l'objet du dépistage, les scores supérieurs à 50 étant considérés comme positifs et les scores inférieurs à 50 comme négatifs. Chaque algorithme de moteur prédictif utilisé pour le dépistage est une solution d'AA verrouillée qui n'apprend pas en continu lorsqu'elle est en production.

L'interface LIMS est un protocole de transfert de données standard dans le secteur des laboratoires, servant à communiquer et à enregistrer les résultats des tests.

Conditionnement ou présentation du dispositif

L'interface utilisateur de ce dispositif est proposée sous la forme d'une application web (app) pour Android, de la version 13 à la version actuelle, et pour iOS, de la version 18 à la version actuelle. L'application est le seul conditionnement de ce dispositif. Pour utiliser l'application, un prestataire de soins doit envoyer un lien sur le téléphone de l'utilisateur. Une fois le lien sélectionné, l'application web s'ouvre automatiquement. Cette application web est uniquement disponible en tant que produit à utiliser sur le lieu de soins. Seuls les prestataires de soins et les organisations disposant des accréditations appropriées peuvent prescrire cette application pour le dépistage.

06

Contrôle des infections

Bien que le logiciel ne puisse pas lui-même être contaminé, l'envoi d'une toux exige que l'utilisateur tousse dans son environnement. La toux étant l'un des modes de transmission interhumaine les plus courants des maladies respiratoires, l'application de procédures de contrôle des infections de haute qualité est un élément de sécurité essentiel lors de l'utilisation d'AudibleHealth AI. Avant tout, suivez le protocole de l'établissement pour la désinfection du matériel. En l'absence de protocole de l'établissement, ou si un patient utilise un smartphone personnel, voici quelques recommandations pour faciliter le contrôle des infections :

- Veillez à ce que le patient et les professionnels de santé portent un masque de qualité N95 pendant le recueil de la toux, le cas échéant.
- Dans la mesure du possible, prévoir un lieu dédié au recueil de la toux, séparé des autres personnes s'il se trouve à l'intérieur, ou idéalement situé à l'extérieur.
- Essuyez soigneusement tous les appareils utilisés pour le recueil de la toux ou les surfaces susceptibles d'avoir été exposées à des gouttelettes ou à des particules en aérosol avec des lingettes jetables, antibactériennes, à base d'alcool. Cela comprend les smartphones ainsi que les autres équipements médicaux, fournitures, etc., le cas échéant.
- Utilisez un plateau de désinfection à lumière UV pour décontaminer les téléphones et tablettes en plaçant l'appareil dans le plateau de décontamination pendant plusieurs minutes. Il est cliniquement prouvé que ces dispositifs éliminent 99 % des bactéries, même dans les petits espaces et interstices des téléphones et tablettes.
- Veiller à ce que le professionnel de santé ou l'agent de santé communautaire porte des gants jetables et les change entre chaque patient au cas où des particules seraient transférées

07

Utilisation d'AudibleHealth AI

7.1


Envoi d'un test

Pour envoyer un test sur un smartphone, vous devez disposer d'un compte auprès d'un distributeur ou avoir la possibilité d'envoyer des tests de manière intégrée à votre dossier médical électronique. Des instructions distinctes sont disponibles pour l'envoi d'un test selon l'option choisie par votre administrateur. Veuillez vous reporter à ces instructions pour envoyer un test à un patient.

7.2

Ouverture du lien

1. Après vous être assuré que le smartphone qui reçoit le test est compatible avec l'application web de test unique (voir COMPATIBILITÉ (§4 Compatibilité) ci-dessus), vous enverrez un lien par SMS (message texte) ou par message WhatsApp, conformément aux instructions mentionnées ci-dessus.
2. Lorsque le patient sélectionne le lien dans le message texte, le smartphone est automatiquement redirigé vers le navigateur web, avec l'application web ouverte.

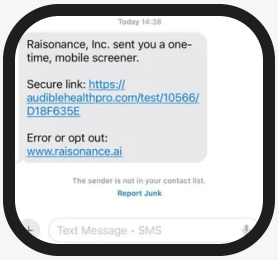

Message texte


7.3

Connexion


1. Lorsque l'application web s'ouvre, le patient est informé que le test est un dépistage respiratoire et un écran lui est présenté pour sélectionner la langue qu'il préfère utiliser dans l'application. L'utilisateur doit sélectionner *Continuer* pour poursuivre.
2. Le patient saisit ensuite sa date de naissance (deux chiffres pour le mois, deux chiffres pour le jour et 4 chiffres pour l'année), accepte les Conditions d'utilisation et sélectionne *Connexion*.

REMARQUE

Les Conditions d'utilisation se trouvent dans un lien, que le patient peut sélectionner et consulter s'il le souhaite.

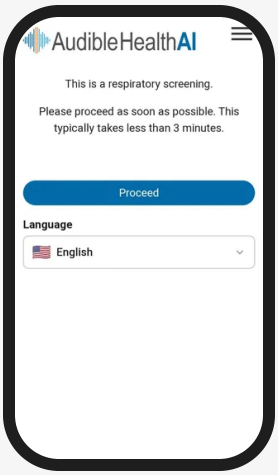

Langue

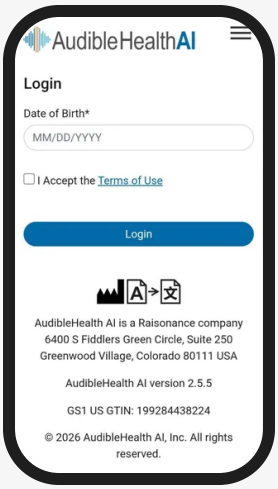


Connexion


7.4
Recueil de la FCV et test

1. Après la connexion, les deux premiers écrans présentent un bref tutoriel qui passe en revue le déroulement du test et donne des conseils utiles pour réussir le recueil de la FCV. Une fois que le patient a fini de les lire (ou que vous les lui avez expliqués), le bouton *Suivant* permet de poursuivre le processus.

> **REMARQUE**
>
> Les patients peuvent également écouter un exemple de toux de bonne qualité en sélectionnant le *triangle de lecture* en bas du deuxième écran d'instructions.

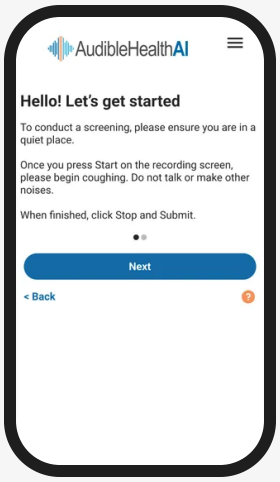

« Bonjour ! Commençons »

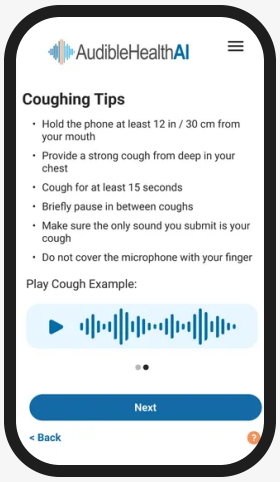

« Conseils pour tousser »

2

ATTENTION

Outre les considérations relatives au son ci-dessous, veuillez tenir compte de l'environnement du point de vue du contrôle des infections avant de préparer le patient à tousser. Le protocole de l'établissement doit être suivi en fonction des symptômes du patient et de la suspicion clinique. Veuillez consulter la section Contrôle des infections (§6 Contrôle des infections) du présent document pour plus d'informations.

3 Pour envoyer une FCV pour analyse, vous ou le patient devez appuyer sur le *bouton du microphone*, et le patient doit tousser pendant au moins 15 secondes. Vous devrez autoriser l'application web à utiliser le microphone du smartphone.

Pour optimiser la qualité de la FCV :

a. Vous (ou le patient) devrez réduire tout bruit de fond dans votre espace, par exemple en éteignant la télévision ou la radio et en éteignant les appareils bruyants ou les climatiseurs, ou en vous en éloignant.
b. Mettez le téléphone en mode silencieux avant l'envoi.
c. Repérez le microphone du smartphone. Le téléphone doit être tenu par les côtés afin qu'aucun doigt ne se trouve sur le microphone pendant que le patient tousse.
d. La personne qui tient le téléphone ne doit bouger ni le téléphone ni ses doigts. Cela pourrait ajouter du bruit supplémentaire et empêcher la réussite de l'envoi.

e. Ne laissez pas le patient parler, manger, mâcher du chewing-gum ou émettre d'autres bruits que la toux pendant l'envoi.

f. Tenez le téléphone à au moins 12 in / 30 cm de votre bouche.

g. Veillez à commencer à tousser dès que vous cliquez sur Démarrer.


h. Encouragez le patient à produire une toux forte venant du fond de la poitrine.

i. Le patient doit tousser pendant au moins 15 secondes et faire une brève pause entre les toux. (Le patient peut écouter l'exemple de toux pour comprendre cette pause.)


j. Le volume de la toux doit être à peu près celui auquel une personne parle normalement au téléphone sur un smartphone.

k. Assurez-vous que le seul son que vous envoyez est la toux.

4 Pendant que le patient tousse, vous verrez un indicateur qui bouge avec la toux. Encouragez le patient à essayer d'amener l'aiguille dans la zone verte à chaque toux. Vous verrez également un minuteur qui vous aidera à déterminer si le patient a toussé pendant au moins 15 secondes.

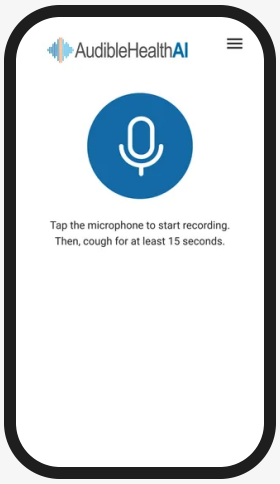

Prêt à enregistrer

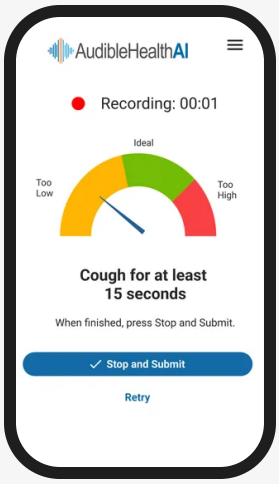


Enregistrement

5 Si un bruit inattendu survient ou si l'envoi pose problème, vous pouvez sélectionner *Réessayer* pour recommencer le recueil de la FCV. Si l'envoi de la toux ne pose aucun problème, sélectionnez *Arrêter et envoyer*.


7.5

Écrans de traitement et d'erreur


6 Pendant le traitement de la FCV, trois écrans indiquent l'avancement : **Envoi en cours...**, **Vérification en cours...** et **Analyse en cours...**.

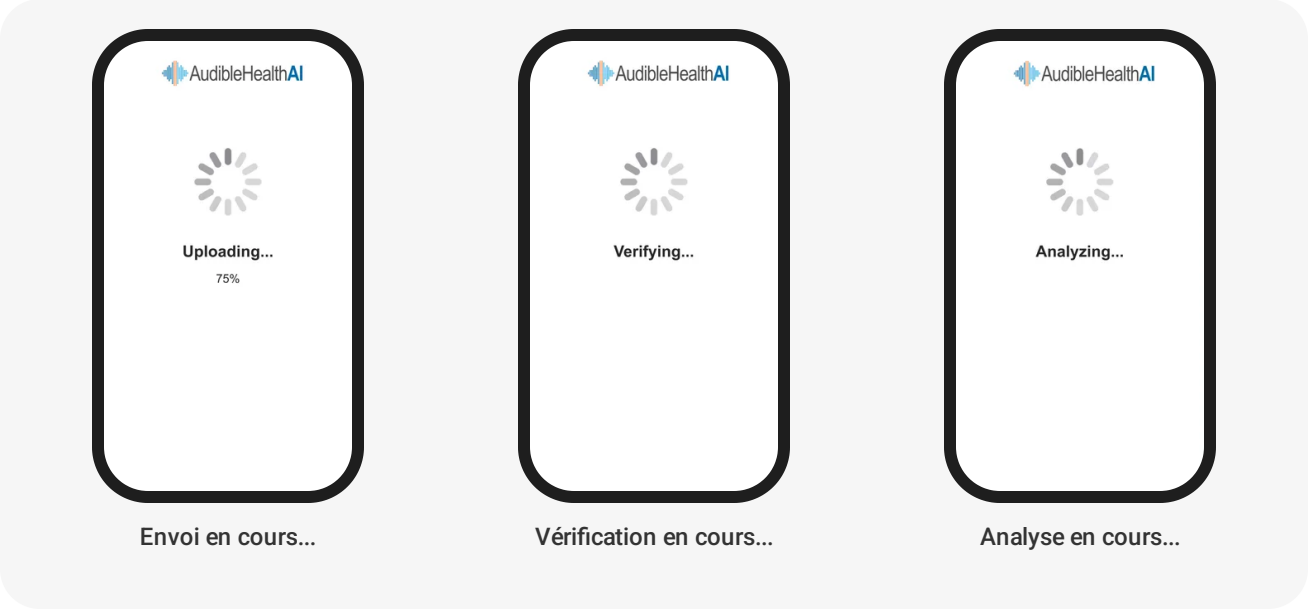


7
- Si un envoi ne contient aucune toux utilisable pour le dépistage, le patient verra l'écran **Oups !** et sera invité à réessayer. Cela n'est pas lié aux résultats du dépistage. Le système de traitement audio est conçu pour rejeter les toux qui n'ont pas la qualité sonore appropriée, afin de vous garantir le résultat de dépistage le plus précis possible pour votre patient.
- Si un envoi contient des toux utilisables pour le dépistage, mais pas les 10 requises, l'écran **Plus de toux nécessaires !** s'affiche et demande un nouvel envoi de toux. Là encore, cela n'est pas lié aux résultats du dépistage.

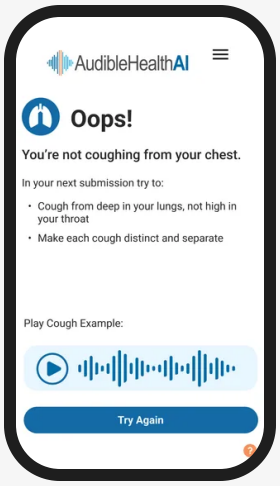


Écran Oups !

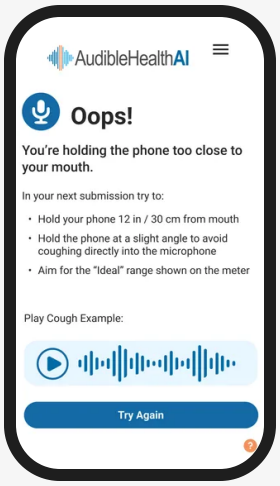


Écran Oups !

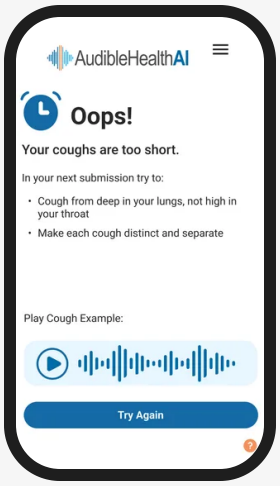


Écran Oups !

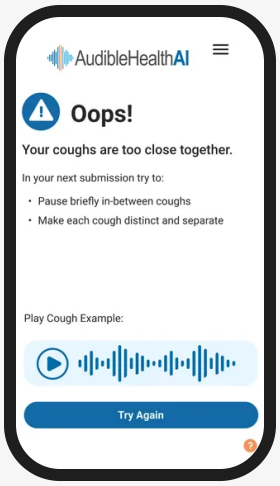

Écran Oups !

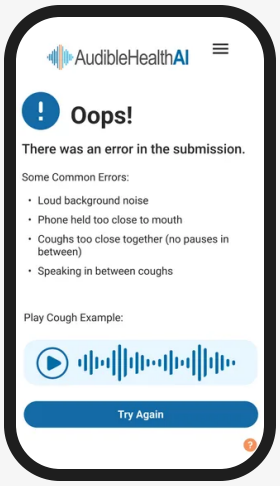

Écran Oups !

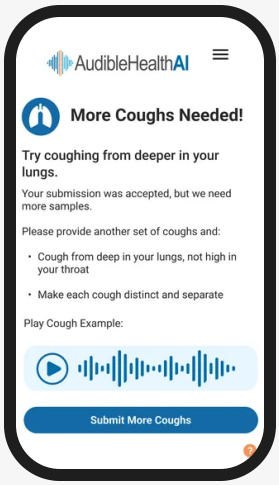

Plus de toux nécessaires !




Plus de toux nécessaires !



Plus de toux nécessaires !



Plus de toux nécessaires !

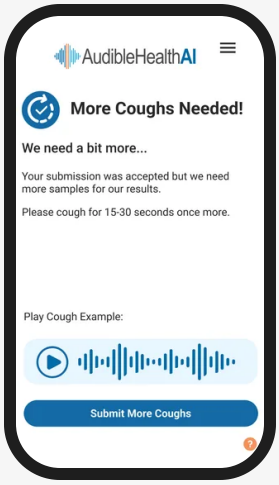

Plus de toux nécessaires !


8 Si le patient reçoit l'écran **Oups !** ou **Plus de toux nécessaires !**, essayez d'aider le patient à suivre les instructions spécifiques affichées à l'écran. Ces écrans sont adaptés aux problèmes audio détectés par le système de traitement audio. Sélectionnez ensuite *Réessayer* ou *Soumettre plus de toux*, et le patient sera invité à envoyer un autre échantillon de toux.

7.6

Écran de pause

9 Si le dispositif n'est pas en mesure d'évaluer l'échantillon de toux du patient après 3 tentatives, un écran de pause de 5 minutes s'affiche. Attendre 5 minutes avant une nouvelle

tentative aide à éviter de fatiguer la voix en toussant de nombreuses fois. Si vous choisissez de faire attendre le patient 5 minutes, le patient pourra utiliser le même lien dans le message texte ou WhatsApp.

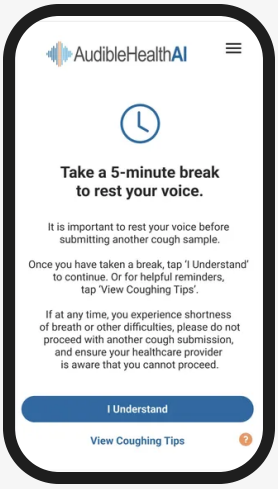

Écran de pause


7.7

Succès


10. Si le dispositif est en mesure d'analyser la toux du patient et de fournir un résultat de dépistage, un message **Succès !** s'affiche.

11. Le patient peut alors sélectionner *Terminé* et fermer le navigateur web. Le smartphone doit alors être désinfecté conformément à la politique de l'établissement afin d'éviter la propagation de l'infection.

12. Les résultats du dépistage seront transmis au système dans lequel le dépistage a été prescrit.

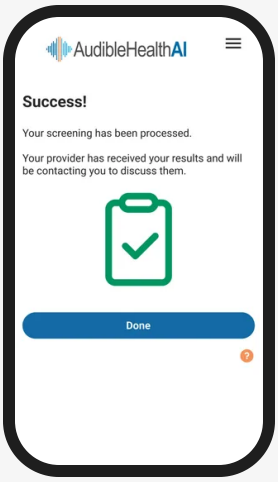

« Succès »

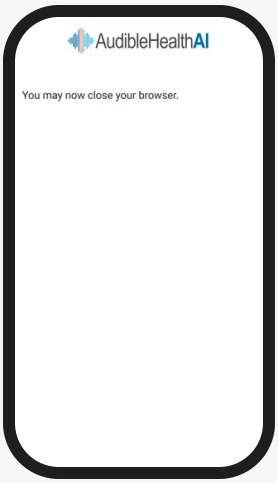

« Fermer le navigateur »

08

Résultats et interprétation

Vous recevrez un résultat de dépistage pour chaque type de dépistage que vous avez sélectionné dans le système dans lequel le dépistage a été prescrit. Les résultats du dépistage sont présentés sous la forme (1) *Risque élevé*, ce qui signifie que la probabilité que le patient soit atteint de la maladie spécifiée est de 50 % ou plus, ou (2) *Risque faible*, ce qui signifie que la probabilité que le patient soit atteint de la maladie spécifiée est inférieure à 50 %. La probabilité de maladie est également affichée à titre indicatif.

Lors de l'étude clinique la plus récente, les performances du CDSS étaient les suivantes :

Dépistage	Sensibilité	Spécificité
Tuberculose	91 %	80 %
COVID-19	96 %	87 %
Pneumonie	94 %	87 %

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
>
> Malgré ces résultats prometteurs, il reste possible qu'un résultat de dépistage soit incorrect. Tous les résultats doivent être interprétés dans le contexte du jugement clinique.

Les résultats concernent le dépistage de l'infection tuberculeuse pulmonaire chez les personnes symptomatiques présentant une toux, de la maladie COVID-19 ou de la pneumonie. Les résultats *Risque élevé* indiquent une vocalisation de toux forcée associée à la présence de la maladie spécifiée. Une corrélation clinique avec les antécédents du patient et d'autres informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer le statut infectieux du patient. Les résultats de dépistage *Risque élevé* n'excluent pas la possibilité d'une co-infection par d'autres bactéries ou virus (y compris d'autres types de dépistage proposés qui n'auraient pas été sélectionnés).


> ⚠ **AVERTISSEMENT**
>
> Les résultats de dépistage *Risque faible* indiquent une vocalisation de toux forcée telle qu'elle apparaît chez une personne confirmée négative pour la maladie. Les résultats *Risque faible* n'excluent pas une infection par un autre virus ou une autre bactérie et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions de traitement ou de prise en charge du patient, y compris les décisions de contrôle des infections. Les résultats *Risque faible* doivent être pris en compte dans le contexte des expositions récentes du patient, de ses antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la maladie, et doivent faire l'objet de tests de suivi si nécessaire pour la prise en charge du patient.

Les résultats des tests concernant les maladies à déclaration obligatoire seront communiqués aux autorités de santé publique compétentes par AudibleHealth AI, Inc., conformément aux exigences locales, étatiques et fédérales.

09

Résolution des problèmes liés au lien à usage unique


- Le lien que vous envoyez à votre patient expire au bout de 14 jours (ou d'un délai plus court si votre administrateur le demande). Si le patient tente d'accéder à un lien expiré, un écran s'affiche dans le navigateur web pour signaler l'expiration. Le patient aura la possibilité de demander un nouveau lien. Vous pourrez consulter la demande dans le système que vous utilisez pour envoyer les tests (comme indiqué dans Envoi d'un test (§7.1 Envoi d'un test)).
- Le lien expire également dès qu'il a été utilisé. Si le patient tente d'accéder à un lien déjà utilisé, un écran s'affiche dans le navigateur web pour signaler que le lien a été utilisé. Dans ce cas, le patient n'aura PAS la possibilité d'envoyer une nouvelle demande via le système.

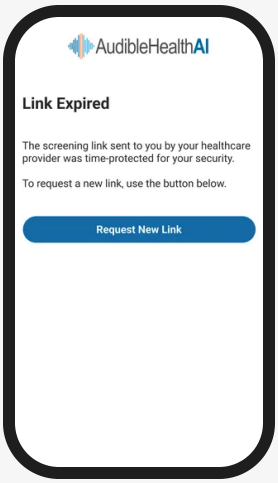


Lien expiré



Nouveau lien demandé

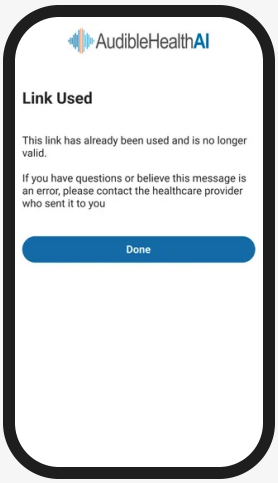

Lien utilisé

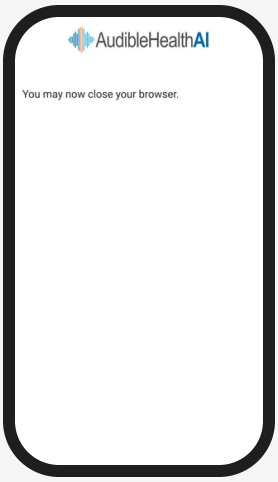

Fermer le navigateur

10
Informations de cybersécurité

Exigences de sécurité

- Exigences minimales relatives au système d'exploitation mobile - Android 13 ou version ultérieure sur mobile et iOS 18 ou version ultérieure sur mobile, avec un navigateur mobile (Android, Chrome, Samsung Internet ou Safari)

- Quel que soit l'appareil mobile, les utilisateurs doivent disposer des derniers correctifs de sécurité disponibles, d'un système d'exploitation à jour et d'un navigateur à jour, tels que fournis par la mise à jour automatique
- Réseau d'accès à Internet 4G, 5G ou Wi-fi sécurisé (c.-à-d. pas de Wi-fi public)
- Bande passante minimale (512 kbit/s en envoi et en réception)
- Microphone en état de fonctionnement

Recommandations de sécurité supplémentaires

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
> Si vous n'avez pas d'indication d'une session sécurisée ou d'un certificat de site valide, vous ne devez pas continuer.

Notre application ne nécessite actuellement pas la géolocalisation ; si elle est demandée, ne l'acceptez pas. De manière générale, les utilisateurs doivent s'assurer que leurs appareils ne sont pas compromis.

- N'utilisez pas un appareil débridé (jailbreaké).
- Assurez-vous que votre appareil est exempt de toute infection par un virus ou un logiciel malveillant.
- Nous recommandons d'utiliser Internet de manière plus privée avec le relais privé iCloud (iCloud Private Relay) ou une connexion VPN personnelle.
- Utilisez le logiciel Contrôle de sécurité (Safety Check) pour détecter les mots de passe ou appareils compromis.
- Protégez l'accès à votre appareil par un accès biométrique (par ex. Apple Face ID ou un code d'accès fort) pour accéder à votre appareil et à votre navigateur.
- Si vous constatez que votre iPhone ou votre appareil Android et vos comptes personnels sont la cible d'attaques à distance sophistiquées (ciblés par certaines des menaces numériques les plus sophistiquées, comme celles provenant d'entreprises privées développant des logiciels espions mercenaires financés par des États), protégez-vous avec le mode Isolement (Lockdown Mode) sur votre appareil mobile.

REMARQUE

Le mode Isolement peut différer entre les appareils iOS et Android selon la version. Les pages web et les communications Internet devraient continuer à fonctionner, mais avec une baisse des performances et de la facilité d'utilisation.

11

Explication des symboles utilisés dans l'étiquetage du produit

Cet étiquetage est régi par la législation du pays dans lequel le produit est commercialisé (les exigences et les symboles peuvent varier selon les pays et les juridictions). Vous trouverez ci-dessous les pictogrammes et leurs définitions, tels qu'ils figurent sur l'étiquette et le conditionnement du dispositif.

Symbole	Signification	Référence
	Fabricant	ISO 15223-1, 5.1.1
	Traduction	ISO 15223-1, 5.7.8

Icône de l'application :

Icône de l'application AudibleHealth AI

12

Fabricant et garantie

Garantie

Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est offerte pour AudibleHealth AI.

Fabricant

Ce produit est fabriqué par : **AudibleHealth AI, Inc.**

6400 S. Fiddlers Green Circle, Suite 250 Greenwood Village, Colorado 80111 USA

Contact : https://help.audiblehealth.ai/

GS1 : 00199284438224 GMDN : 64033