AudibleHealthAI
by RAIsonance

Лоиҳаи тарҷума ба забони Тоҷикӣ, ки ҳанӯз аз ҷониби забондони моҳир баррасӣ нашудааст.

Барои провайдерони тандурустӣ · Direct Link

Дастури истифода

Ин дастури истифода барои провайдерони тандурустӣ пешбинӣ шудааст, ки ният доранд санҷиши AudibleHealth AI-ро бо фиристодани паёме бо пайванд таъин кунанд. Агар шумо бемор бошед, лутфан яке аз Дастурҳои оғози зуди моро барои беморон бинед.

Версия **6**	Дахл дорад ба **Барнома v2.5.0**
Эътибор аз **TBD**	UDI-DI (GS1) **00199284438224**
GMDN **64033**	Забон **Тоҷикӣ**

Ба барномаи AudibleHealth AI v2.5.0 ва нашрҳои минбаъдаи нигоҳдории он (v2.5.x) дахл дорад.

Версияи охиринро онлайн бинед:
https://help.audiblehealth.ai/tg/ifu/direct-link

Лутфан, пеш аз истифодаи ин дастгоҳ ҳамаи дастурҳоро бодиққат хонед.

01

Таъиноти истифода

AudibleHealth AI нармафзори дастгирии қарорҳои клиникӣ (CDSS) мебошад, ки барои дастгирии провайдерони тандурустӣ дар санҷиши сил, COVID ва/ё пневмония тавассути

арзёбии овози сулфаи маҷбурӣ пешбинӣ шудааст. Санҷиш барои истифода дар ҷойи расонидани кӯмаки тиббӣ аз ҷониби провайдери тандурустӣ барои санҷиши шахсони калонсоли 18-сола ва калонтар пешбинӣ шудааст. AudibleHealth AI ташхиси қатъӣ намедиҳад ва ҳамчун воситаи мустақили ташхисӣ пешбинӣ нашудааст. Ҳамчун CDSS, он барои истифода дар якҷоягӣ бо арзёбии хатар, рентгенография ва дигар арзёбиҳои ташхисии тиббӣ пешбинӣ шудааст, то ба клиницист дар қабули қарорҳо оид ба идоракунии ҳар як бемор кӯмак расонад.

02

Зиддинишондодҳо

Истифодаи дастгоҳи AudibleHealth AI барои санҷиш барои шахсони зерин зиддинишондод дорад:

- Осеби шадиди ҷароҳатии ба наздикӣ гирифташудаи сар, гардан, гулӯ, қафаси сина, шикам ё тана
- Стомаи кушодаи трахеостомия
- Осеб ё ҷарроҳии ба наздикӣ гузаронидашудаи қафаси сина/шикам/тана, осеби нейроваскулярии ба наздикӣ гирифташуда/доимӣ ё ҷарроҳии дохиликосахонавии ба наздикӣ гузаронидашуда
- Шахсоне, ки ихтиёран сулфа карда наметавонанд
- Дар таърихи беморӣ: осеб ё ҷарроҳии лавҳаи ғалбервор (cribriform plate), чурраи диафрагма, шуоъдиҳии берунии (external beam) гардан / гулӯ / минтақаи ҷоғу рӯй, осеб/фалаҷи асаби диафрагмавӣ (phrenic nerve), ҷарроҳии радикалии гардан / гулӯ / минтақаи ҷоғу рӯй, осеб ё гиреҳчаҳои пардаҳои овоз
- Шахсоне, ки афазия доранд, метавонанд дар давоми вақти аз ҷониби барнома муқарраршуда FCV ба ҷо овардан душворӣ кашанд ва ҳамчун гурӯҳи аҳолӣ арзёбӣ нашудаанд.

03

Огоҳиҳо ва чораҳои эҳтиётӣ

Маълумоти бехатарӣ чӣ тавр нишон дода мешавад

⚠ **ОГОҲӢ** — Агар пешгирӣ карда нашавад, метавонад ба зарари ҷиддӣ ё қарори нодурусти клиникӣ оварда расонад.

ЭҲТИЁТ — Агар пешгирӣ карда нашавад, метавонад ба зарари ночиз, намунаи ғайриқобили истифода ё санҷиши нобарор оварда расонад.

ЭЗОҲ — Маълумоти ёрирасон, ки ба шумо дар гузаронидани санҷиш кӯмак мекунад.

Огоҳиҳо

⚠ **ОГОҲӢ**

AudibleHealth AI танҳо маълумоти санҷишӣ медиҳад, на маълумот оид ба ташхис, табобат ё идоракунӣ. Натиҷаҳо бояд бо маълумоти клиникӣ муқоиса карда шаванд.

Чораҳои эҳтиётӣ

ЭҲТИЁТ

Бемороне, ки душвории нафаскашӣ ё тангии нафас доранд, метавонанд барои бомуваффақият фиристодани FCV барои таҳлил ба зиёда аз як кӯшиш ниёз дошта бошанд. Агар душвории нафаскашӣ идома ёбад ё бадтар шавад, бемор бояд сулфа карданро қатъ кунад ва дигар роҳҳои санҷишро ҷустуҷӯ намояд.

Мушкилиҳои эҳтимолӣ / ҳодисаҳои номатлуб

Фиристодани намунаҳои сулфа барои таҳлил аз ҷониби нармафзори дастгирии қарорҳои клиникии AI/ML амали камхатар мебошад. Мушкилиҳои эҳтимолӣ метавонанд ҳангоми ҷамъоварии FCV ё пас аз он рух диҳанд, аз ҷумла, вале на танҳо, чархзании сар ё тангии нафас.

ОГОҲӢ

Гарчанде ки дастгоҳ дар таҳқиқоти клиникӣ санҷида шуда ва кори қаноатбахш нишон додааст, имконпазир аст, ки дастгоҳ натиҷаи нодурусти санҷиш диҳад.

04

Мутобиқат

Барномаи веби AudibleHealth AI бо браузерҳои зерин мутобиқ аст: Google Chrome, Safari, Samsung Internet ва Android Chrome, ҳангоми истифода дар смартфонҳое, ки системаҳои амалиётии iOS (версияи 18 ё навтар) ва Android (версияи 13 ё навтар) доранд.

05

Тавсифи дастгоҳ

AudibleHealth AI нармафзори дастгирии қарорҳои клиникӣ (CDSS) мебошад, ки аз маҷмӯи зерпрограммаҳои нармафзорӣ иборат буда, бо истифода аз зеҳни сунъӣ/омӯзиши мошинӣ (AI/ML) ба провайдерони тандурустӣ (HCP) дар санҷиши бемориҳо тавассути арзёбии овози сулфаи маҷбурӣ (FCV) кӯмак мерасонад.

Ҷузъҳои AudibleHealth AI инҳоянд:

- Модули барномаи веби санҷиши якдафъаина (One Time Test Web App Module)
- Модули коркарди садо (Sound Processing Module)
- Муҳаррикҳои пешгӯӣ (Predictive Engines)
- Интерфейси системаи идоракунии маълумоти лабораторӣ (LIMS)

Модули барномаи веби санҷиши якдафъаина, ки интерфейси корбарии дидаи корбари ниҳоӣ мебошад, ба корбари ниҳоӣ имкон медиҳад, ки файли аудиоиро бо истифода аз смартфон фиристад.

Модули коркарди садо (Sound Processing) якчанд ҷузъ дорад, ки сифати кофии садои ҳар як FCV-ро таъмин мекунанд ва FCV-ро барои арзёбӣ аз ҷониби моделҳои AI/ML омода месозанд. 50 мс-и аввал аз ибтидои файли аудиоӣ бурида мешавад, зеро онҳо маълумоте намедиҳанд, ки ба санҷиш кӯмак кунад. Қадами муқаррарсозӣ (normalization) барои ба доираи ягона (-14dBFS) овардани қимати сигнал истифода мешавад, то ба бартараф кардани буриши (de-clipping) намунаҳо кӯмак кунад. Агар файли аудиоӣ дар садои стерео (ки тавассути ду канал пешниҳод мешавад) бошад, он ба моно (як канал) табдил дода мешавад. Филтри гузаронандаи басомадҳои баланд (high-pass filter) басомадҳои пасттар аз ҳадди муайянро аз файл хориҷ мекунад. Сипас қадами дуюми муқаррарсозӣ барои минбаъд ба доираи беҳтар (-6dBFS) овардани файл иҷро мешавад. Баъд FCV аз тақсимкунандаи wav2vec мегузарад, ки файлҳоро ба қисмҳои алоҳида табдил медиҳад, ки ҳар кадоме танҳо як сулфа дорад. Филтри давомнокӣ сифати тақсимҳоро бо хориҷ кардани қисмҳои бисёрсулфагӣ ва қисмҳое, ки барои арзёбии дуруст хеле кӯтоҳанд, таъмин мекунад. Агар пас аз анҷоми коркарди садо ҳадди ақал даҳ сулфаи ҷудошуда қобили истифода бошанд, намунаҳо ба басомадҳои интихобе (sampling rates), ки алгоритм талаб мекунад, аз нав интихоб (re-sample) карда шуда, ба моделҳои AI/ML фиристода мешаванд. Агар даҳ сулфаи қобили истифода набошад, ба корбар пешниҳод карда мешавад, ки намунаи нави FCV-ро, чунон ки дар дастурҳои ҷамъоварии сулфа тавсиф шудааст, фиристад.

Муҳаррики пешгӯӣ аз маҷмӯи таснифкунандаҳои AI ва як oracle-и детерминистӣ иборат аст. Таснифкунандаҳо гурӯҳи шабакаҳои амиқи нейронии конволютсионӣ (CNN) мебошанд, ки барои ошкор кардани нишонаҳои хоси бемориҳои мушаххас дар намунаи сулфа омӯзонида шудаанд; намунаи сулфа аз файли аудиоӣ ба тасвири спектрограммаи бениҳоят сермаълумот табдил дода мешавад. Нармафзори дигари махсус, ки бо номи oracle-и детерминистӣ маълум аст, ба маҷмӯъ пайваст карда шудааст, то пешгӯиҳои ҳар як CNN-ро қабул карда, дар асоси маълумоти аз ҷониби CNN-ҳо додашуда холи ниҳоии пешгӯиро пешниҳод кунад. Бемориҳои марбут ба узвҳои нафаскашӣ дар ҳазорҳо нуқтаи маълумоте, ки дар ҳар як намунаи сулфа ҷамъ оварда мешаванд, нишонаҳо ё намунаҳои хоси беморӣ ба вуҷуд меоранд. Ин аз роҳҳои беназире вобаста аст, ки ҳар як беморӣ ба системаи нафаскашии инсон таъсир мерасонад. Баъзе бемориҳо луоби иловагӣ ба вуҷуд меоранд, боиси тағйири часпакии луоб мегарданд, илтиҳоб ва гармоникаҳои гуногуни сулфаро ба вуҷуд меоранд ё ҳолатҳое монанди танг шудани роҳҳои нафасро пайдо мекунанд. Бо ҷамъоварии сулфаҳои зиёд аз субъектҳое, ки барои бемории мушаххас мусбат будани онҳо тасдиқ шудааст, ва сулфаҳои зиёд аз одамоне, ки манфӣ будани онҳо тасдиқ шудааст, олимони маълумоти AudibleHealth AI моделҳои AI/ML-ро меомӯзонанд, ки

намунаҳои мушаххаси ба натиҷаҳои мусбат ё манфии бемории мавриди ҳадаф алоқамандро ошкор мекунанд. Пас аз он ки таснифкунандаҳои CNN ва oracle-и ҳамроҳи онҳо дар шумораи кофии намунаҳои мусбат ва манфӣ омӯзонида ва санҷида шуданд, муҳаррики пешгӯӣ қодир аст сулфаи навро арзёбӣ кунад, то муайян намояд, ки оё намунаи сулфа ба нишонаи маълуми бемории мавриди ҳадаф мувофиқат мекунад. Барои ҳар як беморӣ маҷмӯи алоҳидаи моделҳои AI/ML бо oracle-и ҳамроҳи худ омӯзонида, санҷида ва ба кор андохта мешавад. Ҳар дафъае, ки ҳал истифода мешавад, провайдер холи рақамии эҳтимолиятро аз 0 то 100 мегирад, ки эҳтимолияти мувофиқат кардан ё накардани намуна ба бемории маълуми мавриди санҷишро нишон медиҳад; холҳои аз 50 боло мусбат ва холҳои аз 50 поён манфӣ ҳисобида мешаванд. Ҳар як алгоритми муҳаррики пешгӯие, ки барои санҷиш истифода мешавад, ҳалли қулфшудаи ML мебошад, ки ҳангоми истифодаи амалӣ (live production) пайваста намеомӯзад.

Интерфейси LIMS протоколи стандартии саноати лабораторӣ барои интиқоли маълумот ҷиҳати гузоришдиҳӣ ва сабти натиҷаҳои санҷиш мебошад.

Бастабандӣ ё шакли пешниҳоди дастгоҳ

Интерфейси корбарии ин дастгоҳ ҳамчун барномаи веб (барнома) барои Android аз версияи 13 то версияи ҷорӣ ва iOS аз версияи 18 то версияи ҷорӣ пешниҳод мешавад. Барнома ягона бастабандии ин дастгоҳ мебошад. Барои истифодаи барнома провайдери тандурустӣ бояд ба телефони корбар пайванд фиристад. Пас аз интихоби пайванд барномаи веб худкор кушода мешавад. Ин барномаи веб танҳо ҳамчун маҳсулот барои истифода дар ҷойи расонидани кӯмаки тиббӣ дастрас аст. Танҳо провайдерони тандурустӣ ва ташкилотҳое, ки салоҳияти дахлдор доранд, метавонанд ин барномаро барои санҷиш таъин кунанд.

06

Назорати сироят

Гарчанде ки худи нармафзор наметавонад олуда шавад, фиристодани сулфа аз корбар талаб мекунад, ки дар муҳити худ сулфа кунад. Азбаски сулфа яке аз роҳҳои маъмултарини аз одам ба одам гузаштани бемориҳои узвҳои нафаскашӣ мебошад, истифодаи тартиботи баландсифати назорати сироят ҳангоми истифодаи AudibleHealth AI

яке аз омилҳои асосии бехатарӣ мебошад. Пеш аз ҳама, протоколи муассиса оид ба безараргардонии таҷҳизотро риоя кунед. Агар протоколи муассиса набошад ё бемор смартфони шахсиро истифода барад, инҷо баъзе тавсияҳо барои кӯмак дар назорати сироят оварда шудаанд:

- Дар ҳолатҳои зарурӣ боварӣ ҳосил кунед, ки бемор ва кормандони тиббӣ ҳангоми ҷамъоварии сулфа ниқоби сифати N95 мепӯшанд.
- Дар сурати имкон, ҷойи махсуси ҷамъоварии сулфа пешбинӣ кардан, ки агар дар дохили бино бошад, аз дигарон ҷудо бошад ё беҳтараш дар берун ҷойгир бошад.
- Ҳама дастгоҳҳое, ки барои ҷамъоварии сулфа истифода шудаанд, ё сатҳҳоеро, ки метавонистанд ба қатраҳо ё заррaҳои аэрозолӣ дучор шаванд, бо рӯймолчаҳои якдафъаинаи зиддибактериявии спиртдор бодиққат пок кунед. Ин смартфонҳо ва инчунин, дар ҳолатҳои зарурӣ, дигар таҷҳизот, лавозимоти тиббӣ ва ғайраро дар бар мегирад.
- Барои безараргардонии телефонҳо ва планшетҳо табақчаи безараргардонии нури ултрабунафш (UV)-ро истифода баред, яъне дастгоҳро барои якчанд дақиқа дар табақчаи безараргардонӣ гузоред. Ин дастгоҳҳо ба таври клиникӣ исботшуда 99% бактерияҳоро, ҳатто дар ҷойҳо ва шикофҳои хурди телефонҳо ва планшетҳо, нест мекунанд.
- Таъмин кардан, ки корманди тиббӣ ё корманди тандурустии ҷамоатӣ дастпӯшакҳои якдафъаина мепӯшад ва онҳоро байни беморон иваз мекунад, дар сурате ки ягон зарра интиқол ёбад

07

Истифодаи AudibleHealth AI

7.1

Фиристодани санҷиш


Барои ба смартфон фиристодани санҷиш шумо бояд дар назди дистрибютор ҳисоб дошта бошед ё имконияти фиристодани санҷишҳоро, ки бо сабти электронии тандурустии шумо

муттаҳид шудааст, дошта бошед. Вобаста ба имконоте, ки маъмури шумо интихоб кардааст, барои фиристодани санҷиш дастурҳои алоҳида дастрасанд. Лутфан, барои ба бемор фиристодани санҷиш ба ин дастурҳо муроҷиат кунед.

7.2

Кушодани пайванд

1. Пас аз он ки боварӣ ҳосил кардед, ки смартфоне, ки санҷишро мегирад, бо барномаи веби санҷиши якдафъаина мутобиқ аст (ниг. МУТОБИҚАТ (§4 Мутобиқат)-ро дар боло), шумо мувофиқи дастурҳои дар боло зикршуда пайвандро тавассути SMS (паёмак) ё паёми WhatsApp мефиристед.
2. Вақте ки бемор пайвандро дар паёмак интихоб мекунад, смартфон худкор ба браузери веб бо барномаи веби кушода мегузарад.

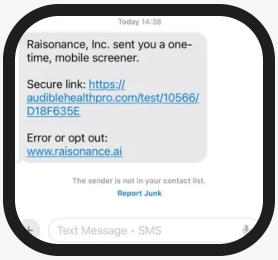

Паёмак


7.3

Воридшавӣ


1. Вақте ки барномаи веб кушода мешавад, ба бемор хабар дода мешавад, ки санҷиш санҷиши узвҳои нафаскашӣ мебошад ва экране нишон дода мешавад, ки дар он забони дилхоҳро барои истифода дар барнома интихоб кардан мумкин аст. Корбар бояд барои идома додан *Идома диҳед*-ро интихоб кунад.
2. Сипас бемор санаи таваллуди худро ворид мекунад (ду рақам барои моҳ, ду рақам барои рӯз ва 4 рақам барои сол), Шартҳои истифодаро қабул мекунад ва *Воридшавӣ*-ро интихоб мекунад.

ЭЗОҲ

Шартҳои истифода дар пайванд ҷойгир аст, ки бемор, агар хоҳад, метавонад онро интихоб карда, аз назар гузаронад.

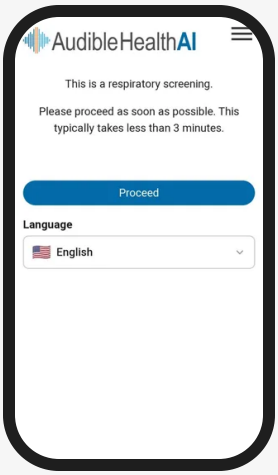

Забон

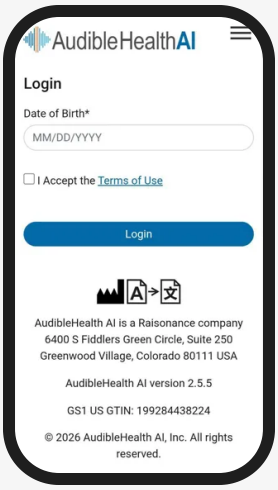

Воридшавӣ


7.4

Ҷамъоварии FCV ва санҷиш


1. Пас аз воридшавӣ ду экрани аввал дастури мухтасар медиҳанд, ки раванди санҷиш ва маслиҳатҳои муфидро барои бомуваффақият ҷамъоварии FCV шарҳ медиҳанд. Вақте ки бемор хондани онҳоро тамом кард (ё шумо онҳоро ба бемор фаҳмондед), тугмаи *Навбатӣ* равандро идома медиҳад.

ЭЗОҲ

Беморон инчунин метавонанд бо интихоби *секунҷаи пахш* дар поёни экрани дуюми дастур намунаи сулфаи хубсифатро гӯш кунанд.

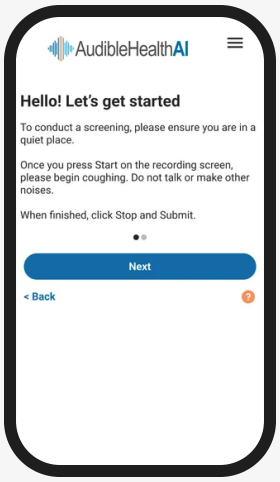

«Салом! Биёед оғоз кунем»

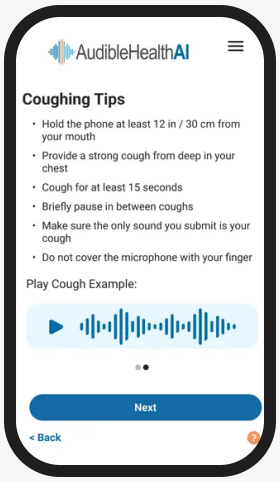

«Маслиҳатҳои сулфа кардан»

2

ЭҲТИЁТ

Илова ба мулоҳизаҳои марбут ба садо, ки дар поён оварда шудаанд, лутфан пеш аз омода кардани бемор ба сулфа кардан муҳитро аз нуқтаи назари назорати сироят баррасӣ кунед. Протоколи муассиса бояд дар асоси аломатҳои бемор ва гумони клиникӣ риоя карда шавад. Барои маълумоти бештар лутфан бахши Назорати сироят (§6 Назорати сироят)-и ин ҳуҷҷатро бинед.

3 Барои фиристодани FCV барои таҳлил шумо ё бемор бояд *тугмаи микрофон*-ро лаб занед ва бемор бояд ҳадди аққал 15 сония сулфа кунад. Шумо бояд ба барномаи веб иҷозат диҳед, ки микрофони смартфонро истифода барад.

Барои беҳтар кардани сифати FCV:

a. Шумо (ё бемор) бояд ҳама гуна садои атрофро дар ҷойи худ кам кунед, масалан телевизор ё радиоро хомӯш кунед ва асбобҳои рӯзгори пурсадо ё дастгоҳҳои кондитсионерро хомӯш кунед ё аз онҳо дур шавед.
b. Пеш аз фиристодан садои телефонро хомӯш кунед.
c. Микрофонро дар смартфон ёбед. Телефонро бояд аз паҳлӯҳояш нигоҳ дошт, то ҳангоми сулфаи бемор ягон ангушт болои микрофон набошад.
d. Касе, ки телефонро нигоҳ медорад, набояд онро ё ангуштони худро ҳаракат диҳад. Ин метавонад садои иловагӣ илова карда, ба фиристодани бомуваффақият халал расонад.

e. Ба бемор иҷозат надиҳед, ки ҳангоми фиристодан гап занад, хӯрок хӯрад, сақич хояд ё ба ғайр аз сулфа садои дигар барорад.

f. Телефонро ҳадди аққал 12 in / 30 cm дуртар аз даҳони худ нигоҳ доред.

g. Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳамин ки Start (Оғоз)-ро пахш кардед, сулфа карданро оғоз мекунед.


h. Беморро ташвиқ кунед, ки аз умқи қафаси синааш сулфаи қавӣ кунад.

i. Бемор бояд ҳадди аққал 15 сония сулфа кунад ва байни сулфаҳо каме таваққуф кунад. (Бемор метавонад барои фаҳмидани ин таваққуф намунаи сулфаро гӯш кунад.)


j. Баландии сулфа бояд тақрибан дар сатҳе бошад, ки одам одатан бо смартфон гап мезанад.

k. Боварӣ ҳосил кунед, ки ягона садое, ки мефиристед, сулфа аст.

4 Ҳангоме ки бемор сулфа мекунад, шумо ченкунаке мебинед, ки бо сулфа ҳаракат мекунад. Беморро ташвиқ кунед, ки бо ҳар як сулфа кӯшиш кунад ақрабакро ба минтақаи сабз барад. Шумо инчунин ҳисобкунаки вақтро мебинед, ки ба шумо кӯмак мекунад муайян кунед, ки оё бемор ҳадди аққал 15 сония сулфа кард.

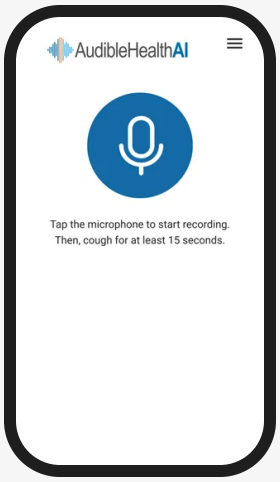

Омода ба сабт

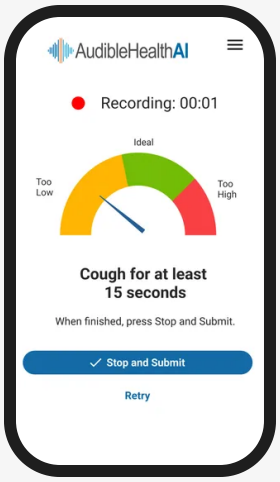

Сабт

5 Агар садои ғайричашмдошт пайдо шавад ё дар фиристодан мушкилот бошад, шумо метавонед барои такрор кардани ҷамъоварии FCV *Такроран кӯшиш кунед*-ро интихоб кунед. Агар дар бораи фиристодани сулфа ягон нигаронӣ набошад, *Қатъ кардан ва фиристодан*-ро интихоб кунед.

7.5


Экранҳои коркард ва хатогӣ

6 Ҳангоме ки FCV коркард мешавад, се экран равандро нишон медиҳанд: **Бор карда истодаем..., Тафтиш карда истодаем...** ва **Таҳлил карда истодаем...**.




Бор карда истодаем... Тафтиш карда истодаем... Таҳлил карда истодаем...


7
- Агар дар фиристодашуда ягон сулфае набошад, ки барои санҷиш истифода шуда тавонад, бемор экрани **Бубахшед!**-ро мебинад ва ба ӯ пешниҳод карда мешавад, ки боз кӯшиш кунад. Ин ба натиҷаҳои санҷиш иртибот надорад. Системаи коркарди аудио тавре тарҳрезӣ шудааст, ки сулфаҳои дорои сифати садои номуносибро рад кунад, то шумо барои бемори худ натиҷаи санҷиши ҳарчи бештар дақиқ гиред.
- Агар дар фиристодашуда баъзе сулфаҳои барои санҷиш қобили истифода бошанд, вале на ҳамаи 10-то, ки лозиманд, экрани **Сулфаи бештар лозим аст!** пайдо мешавад, ки фиристодани сулфаи дигарро талаб мекунад. Боз ҳам, ин ба натиҷаҳои санҷиш иртибот надорад.

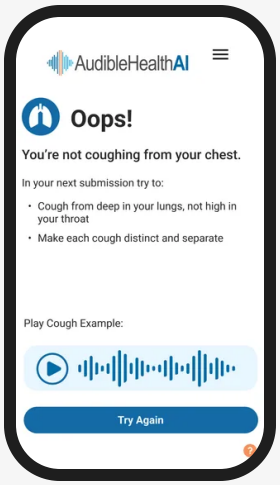


Экрани «Бубахшед!»

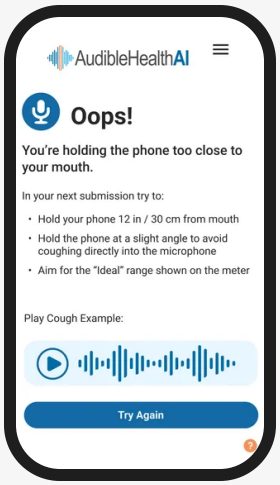


Экрани «Бубахшед!»

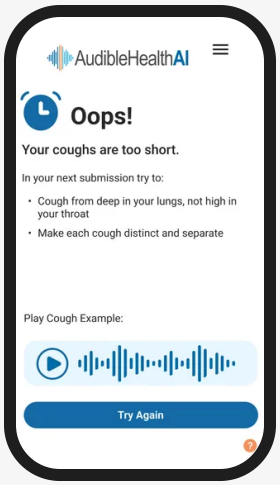


Экрани «Бубахшед!»

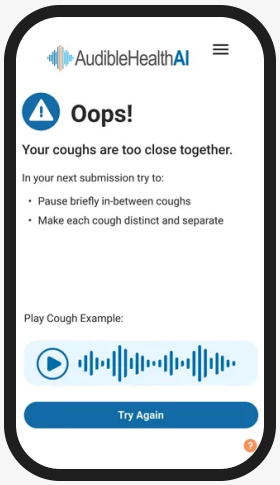

Экрани «Бубахшед!»

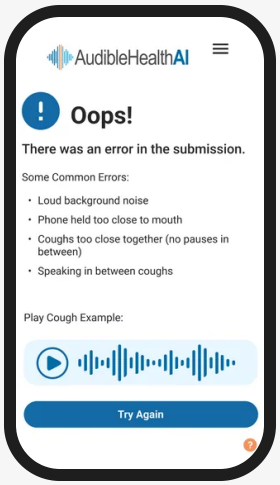

Экрани «Бубахшед!»

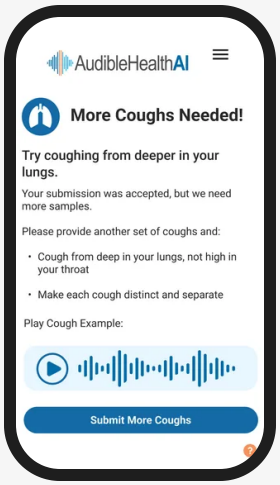

Сулфаи бештар лозим аст!




Сулфаи бештар лозим аст!



Сулфаи бештар лозим аст!



Сулфаи бештар лозим аст!

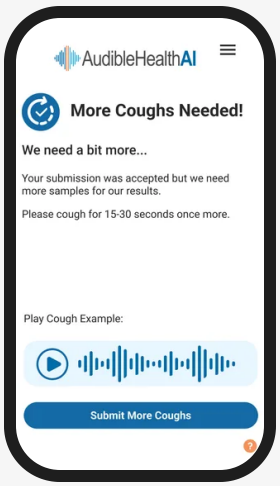


Сулфаи бештар лозим аст!

8 Агар бемор экрани **Бубахшед!** ё **Сулфаи бештар лозим аст!**-ро гирад, кӯшиш кунед ба бемор дар иҷрои дастурҳои мушаххасе, ки дар экран дода шудаанд, кӯмак кунед. Ин экранҳо ба мушкилоти аудиоие, ки системаи коркарди аудио ошкор кардааст, мутобиқ карда шудаанд. Сипас *Боз кӯшиш кунед* ё *Сулфаи бештар фиристед*-ро интихоб кунед ва ба бемор пешниҳод карда мешавад, ки намунаи дигари сулфаро фиристад.

7.6

Экрани танаффус

9 Агар дастгоҳ пас аз 3 кӯшиш намунаи сулфаи беморро арзёбӣ карда натавонад, экрани танаффуси 5-дақиқаӣ пайдо мешавад. 5 дақиқа интизор шудан пеш аз кӯшиши дигар ба пешгирии фишори овоз аз сулфаи зиёд кӯмак мекунад. Агар шумо қарор диҳед, ки бемор 5 дақиқа интизор шавад, бемор метавонад ҳамон пайвандро дар паёмак ё паёми WhatsApp истифода барад.

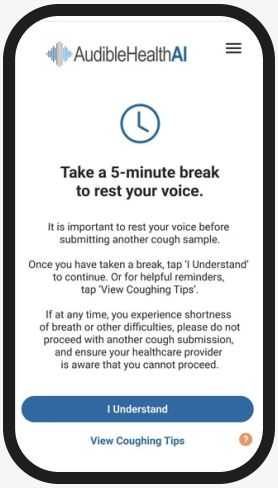

Экрани танаффус


7.7

Муваффақият


10 Агар дастгоҳ сулфаи беморро таҳлил карда, натиҷаи санҷиш дода тавонад, паёми **Муваффақ!** нишон дода мешавад.

11 Дар ин вақт бемор метавонад *Тамом*-ро интихоб карда, браузери вебро пӯшад. Дар ин вақт смартфон бояд мувофиқи сиёсати муассиса барои пешгирии паҳншавии сироят безарар карда шавад.

12 Натиҷаҳои санҷиш ба системае интиқол дода мешаванд, ки дар он санҷиш фармоиш дода шуда буд.

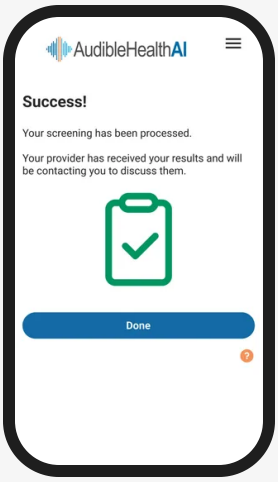

«Муваффақ!»

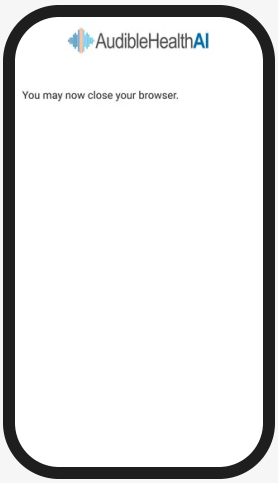

«Пӯшидани браузер»

08

Натиҷаҳо ва тафсири онҳо

Шумо барои ҳар як намуди санҷише, ки интихоб кардаед, дар системае, ки дар он санҷиш фармоиш дода шудааст, натиҷаи санҷиш мегиред. Натиҷаҳои санҷиш чунин пешниҳод мешаванд: (1) *Хатари баланд*, яъне эҳтимолияти он ки бемор ба бемории зикргардида гирифтор бошад, 50% ё бештар аст, ё (2) *Хатари паст*, яъне эҳтимолияти он ки бемор ба бемории зикргардида гирифтор бошад, камтар аз 50% аст. Эҳтимолияти беморӣ низ барои маълумот нишон дода мешавад.

Дар охирин таҳқиқоти клиникӣ самаранокии CDSS чунин буд:

Санҷиш	Ҳассосият	Хосият
Сил	91%	80%
• COVID-19	96%	87%
Пневмония	94%	87%

> ⚠ **огоҳӣ**
>
> Сарфи назар аз ин натиҷаҳои умедбахш, эҳтимол боқӣ мемонад, ки натиҷаи санҷиш нодуруст бошад. Ҳамаи натиҷаҳо бояд дар доираи хулосаи клиникӣ баррасӣ карда шаванд.

Натиҷаҳо барои санҷиши сирояти сили шуш дар шахсоне, ки аломати сулфа доранд, бемории COVID-19 ё пневмония мебошанд. Натиҷаҳои *Хатари баланд* нишон медиҳанд, ки овози сулфаи маҷбурӣ бо мавҷудияти бемории зикргардида алоқаманд аст. Барои муайян кардани ҳолати сироятии бемор муқоисаи клиникӣ бо таърихи беморӣ ва дигар маълумоти ташхисӣ зарур аст. Натиҷаҳои санҷиши *Хатари баланд* эҳтимоли сирояти ҳамзамон бо дигар бактерияҳо ё вирусҳоро (аз ҷумла дигар намудҳои пешниҳодшудаи санҷиш, ки шояд интихоб нашуда бошанд) истисно намекунанд.


> ⚠ **огоҳӣ**
>
> Натиҷаҳои санҷиши *Хатари паст* овози сулфаи маҷбуриеро нишон медиҳанд, ки дар шахсе дида мешавад, ки манфӣ будани ӯ барои беморӣ тасдиқ шудааст. Натиҷаҳои *Хатари паст* сироятро бо вирус ё бактерияи дигар истисно намекунанд ва набояд ҳамчун ягона асос барои қарорҳои табобат ё идоракунии бемор, аз ҷумла қарорҳои назорати сироят, истифода шаванд. Натиҷаҳои *Хатари паст* бояд дар заминаи тамосҳои охирини бемор, таърихи беморӣ ва мавҷудияти нишонаҳо ва аломатҳои клиникии ба беморӣ мувофиқ баррасӣ шаванд ва дар сурати зарурат барои идоракунии бемор бо санҷиши минбаъда тасдиқ карда шаванд.

Натиҷаҳои санҷиш барои бемориҳое, ки бояд гузориш дода шаванд, аз ҷониби AudibleHealth AI, Inc. мувофиқи талаботи маҳаллӣ, иёлотӣ ва федералӣ ба мақомоти дахлдори тандурустии ҷамъиятӣ гузориш дода мешаванд.

09

Ҳалли мушкилоти пайванди якдафъаина


- Пайванде, ки шумо ба бемори худ мефиристед, пас аз 14 рӯз (ё мӯҳлати кӯтоҳтар, агар маъмури шумо дархост карда бошад) эътибори худро гум мекунад. Агар бемор кӯшиш кунад, ки ба пайванди мӯҳлаташ гузашта дастрасӣ пайдо кунад, дар браузери веб экране пайдо мешавад, ки дар бораи гузаштани мӯҳлат хабар медиҳад. Бемор имконият хоҳад дошт, ки пайванди нав дархост кунад. Шумо метавонед дархостро дар системае, ки барои фиристодани санҷишҳо истифода мебаред, бинед (чунон ки дар Фиристодани санҷиш (§7.1 Фиристодани санҷиш) зикр шудааст).
- Пайванд инчунин ҳамин ки истифода шавад, эътибори худро гум мекунад. Агар бемор кӯшиш кунад, ки ба пайванде, ки аллакай истифода шудааст, дастрасӣ пайдо кунад, дар браузери веб экране пайдо мешавад, ки дар бораи истифода шудани пайванд хабар медиҳад. Дар ин ҳолат бемор имконияти тавассути система фиристодани дархости минбаъдаро НАДОРАД.

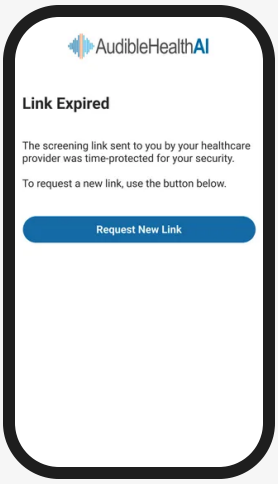


Пайванд мӯҳлаташ гузашт



Пайванди нав дархост шуд

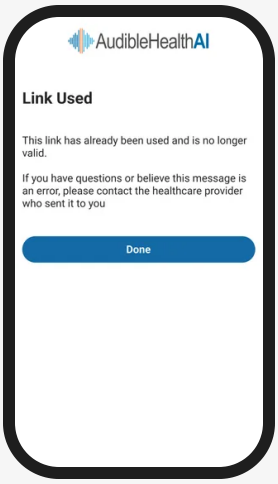

Пайванд истифода шуд

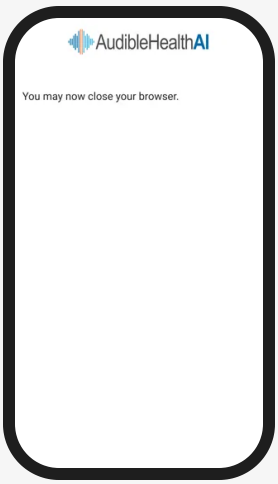

Пӯшидани браузер

10
Маълумот дар бораи киберамният

Талаботи амниятӣ

- Талаботи ҳадди ақал ба системаи амалиётии мобилӣ - Android 13 ё баландтар дар дастгоҳи мобилӣ ва iOS 18 ё баландтар дар дастгоҳи мобилӣ бо браузери мобилӣ (Android, Chrome, Samsung Internet ё Safari)

- Новобаста аз дастгоҳи мобилӣ, корбарон бояд охирин ислоҳоти амниятии дастрас, нармафзори навшудаи системаи амалиётӣ ва нармафзори браузерро, ки тавассути навсозии худкор дастрас карда мешаванд, дошта бошанд
- Шабакаи бехатари дастрасӣ ба Интернет тавассути 4G, 5G ё Wi-fi (яъне на Wi-fi-и ҷамъиятӣ)
- Ҳадди ақали паҳнои банд (512 kbps барои боркунӣ ва боргирӣ)
- Микрофони корӣ

Тавсияҳои иловагии амниятӣ

> ⚠ **ОГОҲӢ**
>
> Агар нишонаи ҷаласаи бехатар ё сертификати эътиборноки сомона надошта бошед, набояд идома диҳед.

Барномаи мо ҳоло ба ҷойгиршавии ҷуғрофӣ (геолокатсия) ниёз надорад; агар дархост шавад, онро қабул накунед. Ҳамчун қоидаи умумӣ, корбарон бояд боварӣ ҳосил кунанд, ки дастгоҳҳояшон осеб надидаанд (compromised нестанд).

- Дастгоҳи jailbreak-шударо истифода набаред.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳи шумо ба вирус ё нармафзори зараровар (malware) сироят наёфтааст.
- Мо тавсия медиҳем, ки Интернетро бо iCloud Private Relay ё пайвасти шахсии VPN махфитар истифода баред.
- Барои муайян кардани паролҳо ё дастгоҳҳои осебдида нармафзори Safety Check-ро истифода баред.
- Дастрасӣ ба дастгоҳи худро бо дастрасии биометрӣ (масалан, Apple Face ID ё рамзи қавӣ (Strong Passcode)) барои дастрасӣ ба дастгоҳ ва браузери худ ҳифз кунед.
- Агар бинед, ки iPhone ё дастгоҳи Android ва ҳисобҳои шахсии шумо ҳадафи ҳамлаҳои мураккаби фосилавӣ қарор гирифтаанд (ҳадафи баъзе аз мураккабтарин таҳдидҳои рақамӣ, масалан таҳдидҳо аз ширкатҳои хусусие, ки нармафзори ҷосусии зархаридро бо сарпарастии давлат таҳия мекунанд), худро бо реҷаи Lockdown Mode дар дастгоҳи мобилии худ ҳифз кунед.

ЭЗОҲ

Реҷаи Lockdown Mode метавонад вобаста ба версия дар дастгоҳҳои iOS ва Android фарқ кунад. Саҳифаҳои веб ва алоқаи интернетӣ бояд кор карданро идома диҳанд, аммо бо коҳиши самаранокӣ ва қулайии истифода.

11

Шарҳи аломатҳое, ки дар тамғагузории маҳсулот истифода мешаванд

Ин аз ҷониби қонунгузории кишваре, ки маҳсулот дар он ба фурӯш бароварда мешавад, танзим карда мешавад (талабот ва аломатҳо метавонанд дар кишварҳо ва қаламравҳои қонунгузории гуногун фарқ кунанд). Дар поён тасвирҳо ва таърифҳои онҳо, чунон ки дар тамғаи дастгоҳ ва бастабандӣ зоҳир мешаванд, оварда шудаанд.

Аломат	Маъно	Истинод
	Истеҳсолкунанда	ISO 15223-1, 5.1.1
	Тарҷума	ISO 15223-1, 5.7.8

Нишонаи барнома:

Нишонаи барномаи AudibleHealth AI

12

Истеҳсолкунанда ва кафолат

Кафолат

Барои AudibleHealth AI ягон кафолат, воқеӣ ё зимнӣ, пешниҳод карда намешавад.

Истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунандаи ин маҳсулот: **AudibleHealth AI, Inc.**

6400 S. Fiddlers Green Circle, Suite 250 Greenwood Village, Colorado 80111 USA

Тамос: https://help.audiblehealth.ai/

GS1: 00199284438224 GMDN: 64033